

XO® 4-1

Quick Guide

Ανοίξτε/κλείστε το XO 4 με τον πράσινο κεντρικό διακόπτη.

Όταν σηκωθεί ένα από τα κοπτικά εργαλεία ελέγχονται από τον XO ποδοδιακόπτη – δείτε επόμενη σελίδα.

Με τα κοπτικά εργαλεία σε αρχική θέση ελέγχονται οι λειτουργίες της XO 4 έδρας και καρέκλας με τον XO Ποδοδιακόπτη και XO Χειριστήριο.

Ενεργοποίηση του πτυελοδοχείου χειροκίνητα είτε με  ή στον ποδοδιακόπτη με .

Ενεργοποιήσετε το ποτηράκι με .

Η αναρρόφηση ενεργοποιείτε αυτόματα με την άρση των σωλήνων από τις θέσεις τους.

Λειτουργία του **XO 4 Προβολέα** από τον οπτικό αισθητήρα κάτω από την κεφαλή του.

Κρατήστε το χέρι σας στο πεδίο ενεργοποίησης του αισθητήρα για λιγότερο από 1" και ο προβολέας ανοίγει/κλίνει. Κρατήστε το χέρι σας περισσότερο για αλλαγή έντασης του φωτός.

Με το  **ενεργοποιήσετε το συνδεδεμένο κουδούνι.**

Έδρα και Καρέκλα

Φέρετε την **XO 4 Καρέκλα** στη θέση 1 με  και στη θέση 2 με .

Με ένα πάτημα  πηγαίνει σε θέση ξεπλύματος.

Με δεύτερο πάτημα  πηγαίνει στην μηδενική θέση.

Αν  πατηθεί δυο φορές σε λιγότερο από 1" η καρέκλα πηγαίνει σε μηδενική θέση.

Πηγαίνετε στη προηγούμενη θέση με .


Επείγων ακινητοποίηση καρέκλας: Σταματήστε την καρέκλα άμεσα εν κινήσει με οποιοδήποτε πλήκτρο του XO Ποδ/πτη ή Χειριστηρίου (εκτός ).




 και  διακόπτες



Αισθητήρας φως

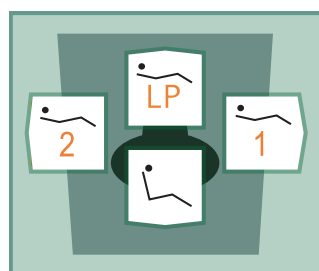

XO Χειριστήριο στη βάση της καρέκλας

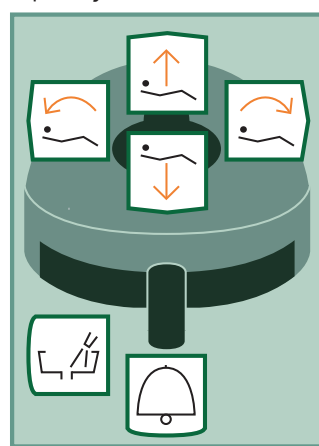

XO Ποδοδιακόπτης

-  Θέση 1
-  Θέση 2
-  Μία: Ξέβγαλμα
Δuo: Μηδενική
-  Τελευταία Θέση
-  Ανέβασμα
-  Κατέβασμα
-  Πλάτη: μπροστά
-  Πλάτη: πίσω
-  Κουδούνι
-  Πτυελοδοχείο
-  Ποτήρι

Μοτέρ

Τραβήξτε το μοτέρ μπροστά και ελέγξτε το με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Λειτουργήσετε το με την φορά των δεικτών του ρολογιού με  και αντίθετα με  εύρος 250 - 40,000 σ.α.λ.

Αλλάξτε την επιλογή του σπρέι: νερό & αέρας, μόνο αέρας ή όχι σπρέι με .

Τουρμπίνα

Τραβήξτε την τουρμπίνα μπροστά και ελέγξτε την με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Ξεκινήσετε/σταματήσετε την τουρμπίνα με  ή .

Αλλάξτε την επιλογή του σπρέι: νερό & αέρας ή όχι σπρέι με .

Υπέρηχος

Τραβήξτε τον υπέρηχο μπροστά και ελέγξτε την με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Ξεκινήσετε/σταματήσετε την ταλάντωση του υπέρηχου με  ή .

Διαλέξτε 3 επίπεδα ταλάντωσης:

Αυξήσετε επίπεδο .

Μειώσετε επίπεδο .

Δείτε το παρών επίπεδο ταλάντωσης στην οθόνη:





Ελάχιστο



Μεσαίο



Μέγιστο

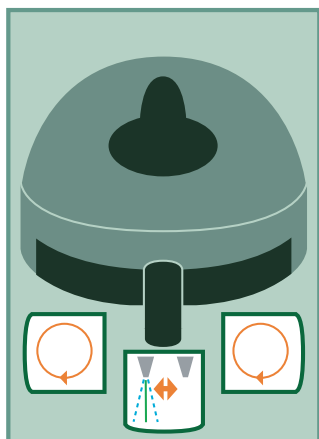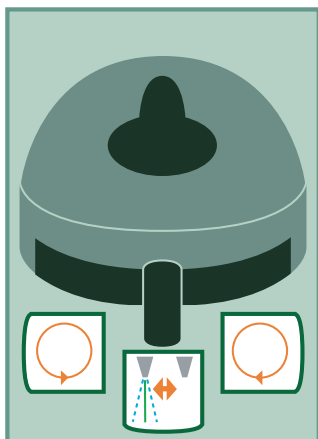

Φωτοπολυμερισμός

Τραβήξτε τον φωτοπολυμερισμό μπροστά και ελέγξτε την με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Ο προκαθορισμένος χρόνος έκθεσης είναι 20".

Αρχίστε το φωτοπολυμερισμό με  ή .

Ακούγεται ένα ήχος μπιπ μετά από κάθε 10".

Ενδοστωματική Κάμερα

Σε αντίθεση με όλα τα άλλα κοπτικά εργαλεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενδοστωματική κάμερα σε συνδυασμό και με άλλο εργαλείο.



Τραβήξτε την κάμερα μπροστά και θα δείτε την εικόνα στην οθόνη.

Ελέγχετε την κάμερα με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη όταν δεν είναι ενεργό άλλο εργαλείο.

Εναλλαγή μεταξύ «παγώματος» και «εικόνας» με .

Η επιλογή «παγώματος» προϋποθέτει και την εγκατάσταση σχετικού προγράμματος στον συνδεδεμένο Η/Υ.

	Σπρέι (νερό και αέρας)
	Νερό μόνο
	Αέρας μόνο
	Χωρίς αέρα και νερό

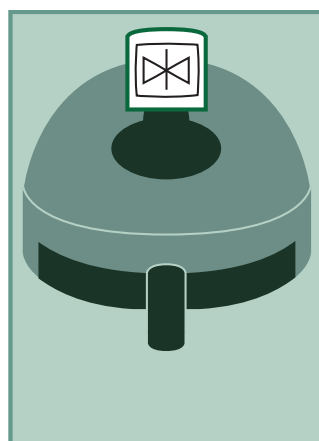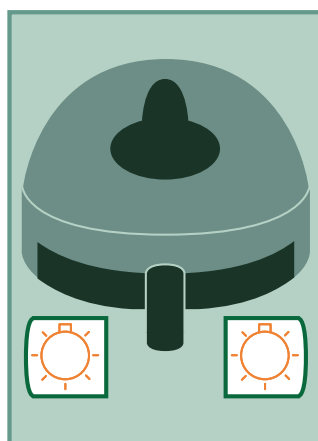

-  Περιστροφή αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού
-  Περιστροφή με τους δείκτες του ρολογιού
-  Επιλογή σπρέι
-  Ταλάντωση υπέρηχου
-  Επιλογή νερού υπέρηχου
-  Αύξηση ταλάντωσης - υπέρηχος
-  Μείωση ταλάντωσης - υπέρηχος
-  Ενεργοποίηση φωτοπολυμερισμού
-  Πάγωμα/εικόνα ενδοστωματικής κάμερας

Συντήρηση

Ενέργειες Αντιβακτηριακού Ελεγχου

Αν ο ΧΟ Ποδοδιακόπτης γλιστράει στο πάτωμα όταν ενεργοποιείτε: Καθαρίστε της λαστιχένιες επαφές με βενζίνη.

Το πρωί πριν τον πρώτο ασθενή

1. Τελειώστε τη διαδικασία καθαρισμού σωληνώσεων:
 - Ελέγξτε ότι τα εργαλεία βρίσκονται ακόμα στο πτυελοδοχείο
 - Ανοίξτε την έδρα
 - Αυτόματα οι σωληνώσεις νερού καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό
 - Ελέγξτε την παρούσα κατάσταση στην οθόνη

2. Τοποθετήστε αποστειρωμένα/νέα:
 - Λάστιχο εργαλείων
 - Κοπτικά εργαλεία
 - Ποτήρι
 - Χειρολαβές γέφυρας, προβολέα, οθόνης
 - Φίλτρα & ακροφύσια αναρροφήσεων

Μετά από κάθε ασθενή

1. Αφαιρέστε μολυσμένα:
 - Κοπτικά εργαλεία
 - Λάστιχο εργαλείων
 - Ποτήρι
 - Χειρολαβές γέφυρας, προβολέα, οθόνης
2. Καθαρίστε και απολυμάνετε τις επιφάνειες
3. Προσαρμόστε αποστειρωμένα/νέα:
 - Λάστιχο εργαλείων
 - Κοπτικά εργαλεία
 - Ποτήρι
 - Χειρολαβές γέφυρας, προβολέα, οθόνης

Το βράδυ μετά το τελευταίο ασθενή

1. Απολύμανση αναρροφήσεων:
 - Ενεργοποίηση 
 - Τοποθετήστε τους σωλήνες στις υποδοχές
 - Ελέγξτε την παρούσα κατάσταση στην οθόνη
2. Αφαιρέστε μολυσμένα:
 - Κοπτικά εργαλεία
 - Λάστιχο εργαλείων
 - Πτυελοδοχείο, φίλτρο αμαλγάματος & βάση ποτηριού (στρέψτε την βάνα πριν αφαιρέσετε το πτυελοδοχείο)
 - Χειρολαβές γέφυρας, προβολέα, οθόνης
 - Φίλτρα & ακροφύσια αναρροφήσεων
3. Καθαρίστε και απολυμάνετε τις επιφάνειες & την ταπετσαρία της καρέκλας
4. Προσαρμόστε αποστειρωμένα/νέα:
 - Πτυελοδοχείο, φίλτρο αμαλγάματος & βάση ποτηριού (στρέψτε την βάνα μετά την τοποθέτηση του πτυελοδοχείου)
5. Αρχίστε την διαδικασία απολύμανσης σωληνώσεων νερού:
 - τοποθετήστε τα εργαλεία στην βάση στο πτυελοδοχείο
 - Πατήστε  για ν' αδειάσει το δοχείο
 - σβήστε την έδρα αφήνοντας τα εργαλεία στο πτυελοδοχείο




Σύστημα απολύμανσης σωληνώσεων νερού.



Σωλήνες αναρρόφησης προσαρμοσμένες στις υποδοχές απολύμανσης αναρροφήσεων.



Αφαίρεση πτυελοδοχείου

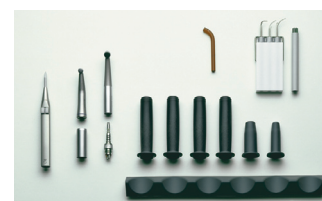

Μέρη XO 4 που κλιβανίζονται (134ο)



Μέρη που καθαρίζονται στον θερμο-αποστειρωτή (90ο)



Καθαρίζετε τις πλαστικές βάσεις του ΧΟ Ποδοδιακόπτη συχνά με βενζίνη



XO CARE A/S
Usseørd Mølle
DK 2970 Hørsholm
Denmark
+45 70 20 55 11
info@xo-care.com
www.xo-care.com