

Vedligeholdelse Hygiejne rutiner

Hvis XO Fodkontakten ikke står fast på gulvet, når den er aktiveret:

Rengør gummifødderne under XO Fodkontakten med rensbenzin.

Bemærk:
Efter desinficering af instrument broens overflader, skal væsken fordampe **helt** inden gummi anlæg placeres igen.



Bemærk:
Hvis instrument slanger har været afmonteret, så skal stik og fatning aftørres for evt. vand inden slangen igen monteres i instrument broens fatning.



Om morgenen inden første patient

1. Afslut desinfektion af unnittens vandsystem:
 - Check at unitinstrumenterne stadig er i instrumentholderen på fontænen
 - Tænd for unnitten
 - Unittens vandsystem gen-nemskylls automatisk med desinficerings-væske
 - Se status på display

2. Placér sterile / desinficerede / nye:
 - Instrumentunderlag
 - Unitinstrumenter
 - Vandglas
 - Håndtag på instrumentbro, lampe og skærm
 - Sugefiltre og kapper for sugenipler

Efter hver patient

1. Fjern kontaminerede:
 - Unitinstrumenter
 - Instrumentunderlag
 - Vandglas
 - Håndtag på bro, lampe og skærm
2. Rengør og desinficér overflader
3. Placér sterile / desinficerede:
 - Instrumentunderlag
 - Unitinstrumenter
 - Vandglas
 - Håndtag på instrumentbro, lampe og skærm

Om aftenen efter sidste patient

1. Desinficér sugesystemet:
 - Aktivér
 - Sæt begge sugeslanger på desinficeringsnipler
 - Aktivér
 - Se status på display
2. Fjern kontaminerede:
 - unitinstrumenter
 - Instrumentunderlag
 - Fontæneskål, guldfang og vandglasfylderskål
 - Håndtag på instrumentbro, lampe og skærm
 - Sugefiltre og kapper for sugenipler
3. Rengør og desinficér overflader på unit og stol
4. Placér desinficeret:
 - Fontæneskål, guldfang og vandglasfylderskål (Når fontæneskål er placeret, drejes vandhanen på plads).
5. Start desinfektion af unit-tens vandsystem:
 - unnittens vandsystem:
 - Placér alle instrumenter i instrumentholderen på fontænen
 - Tryk på for at tømme ekspansionsbeholderen for vand
 - Sluk for unnitten med instrumenterne i instrumenthold-eren på fontænen



Desinficering af vandsystem.



Sugeslanger placeret på desinfektionsnipler.



Fontæneskål tages af.



XO 4 dele, som kan autoklaveres (134°C)



Dele, som kan vaskes i en termo-desinfektor (90°C).



Rengør jævnlgt gummifødderne un-der XO Fodkontakt med rensbenzin.

XO CARE A/S
Usserød Mølle
Håndværkersvinget 6
DK 2970 Hørsholm
Denmark

Tel +45 70 20 55 11
info@xo-care.com
www.xo-care.com



XO® 4-2 / XO® 4-6
Quick Guide

Unit og stol

Tænd/sluk XO 4 med den grønne kontakt bag på standen.

Når et unitinstrument er fremme, styres det af XO Fodkontakt – se næste side.

Når alle unitinstrumenter er på plads, styres unit og stol med XO Fodkontakt og XO Joystick. Visse funktioner styres automatisk eller med manuelle kontakter.

Fontæneskyllet starter automatisk, når vandglas-fylderen stopper, og stolen når skylleposition. Aktiver fontæneskyllet manuelt med .

Aktiver **glasfylder** med i mindre end 1 sekund og glasset fyldes i overens-stemmelse med den ind-stillede vandmængde. Aktiver igen i mindre end 1 sekund for at standse automatisk opfyldning.

Tilkald klinikassistenten med .



og kontakter.

Hvis aktiveres i mere end 1 sekund, vil glasset blive fyldt så længe kontakt-en er aktiveret. De samme funktioner findes på XO Fodkontakten og kan også anvendes af klinik-assistenten.

Suget starter automatisk, når en slange løftes ud af holderen.

Operationslampen tændes automatisk, når stolen kommer i Position 1, 2 eller Sidste Position. Lampen slukkes, når stolen aktiveres mod Skyl eller Nul-position. Styr lampen berøringsfrit: Hold hånden indenfor »aktiveringsafstand« i mind-re end 1 sekund, og lampen tænder/slukker. Hvis hånden holdes i mere end 1 sekund, justeres lysstyrken.



Berøringsfri betjening af lampe


Placer **XO 4 stolen** i Posi-tion 1 med og i Position 2 med .

Første gang aktiveres, føres stolen til Skylleposition.


Anden gang aktiveres føres stolen til Nulposition.

Hvis aktiveres 2 gange inden for 1 s går stolen direkte til Nulposition. Gå til Sidste Position med .

Nødstop af stol: Stolen standses straks ved be-røring af en hvilken som helst af kontakterne på XO Fodkontakt eller XO Joystick (undtagen).

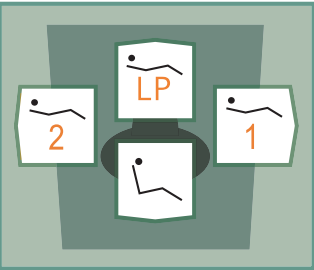

XO Joystick på stolebasis.

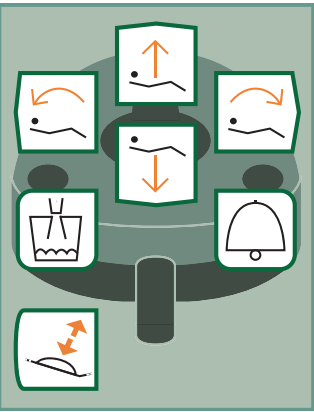

XO Fodkontakt.

Indstil **lændestøtten** med . Første gang aktiveres forøges lænde-støtten, anden gang aktiveres formindskes læn-destøtten. Patienten kan selv indstille lændestøtten med fjernbetjeningen.

- Position 1
- Position 2
- 1. aktivering: Skylleposition
2. aktivering: Nulposition
- Sidste Position
- Løft stol
- Sænk stol
- Løft ryglæn
- Sænk ryglæn
- Start / stop vandglasfylder
- Klinikassistentkald
- Lændestøtte: Forøg / formindsk
- Start / stop fontæneskyl