

XO® 4-1

Quick Guide

Tænd/sluk XO 4 med den grønne kontakt bag på standen.

Når et unitinstrument er fremme, styres det af XO Fodkontakt – se næste side.

Når alle unitinstrumenter er på plads, styres unit og stol med XO Fodkontakt og XO Joystick.

Start **fontæneskyl** manuelt med enten  eller med XO Fodkontakt .

Aktiver **vandglasfylder** med .

Suget starter automatisk, når en slange løftes ud af holderen.

Styr **XO 4 lampen** berøringsfrit: Hold hånden indenfor »aktiveringsafstand« i mindre end 1 sekund, og lampen tænder/slukker. Hvis hånden holdes i mere end 1 sekund, justeres lysstyrken.

Tilkald klinikassistenten med .

Unit og Stol

Placer **XO 4 stolen** i Position 1 med  og i Position 2 med .

Første gang  aktiveres, føres stolen til skylleposition.

Anden gang  aktiveres føres stolen til Nulposition.

Hvis  aktiveres to gange inden for 1 sekund, går stolen direkte til Nulposition. Gå til Sidste Position med .


Nødstop af stol: Stolen standses straks ved berøring af en hvilken som helst af kontakterne på XO Fodkontakt eller XO Joystick (undtagen ).




 og  kontakter.



Berøringsfri betjening af lampe

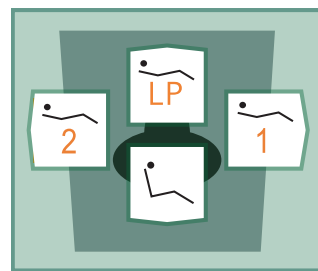

XO Joystick på stolebasis.

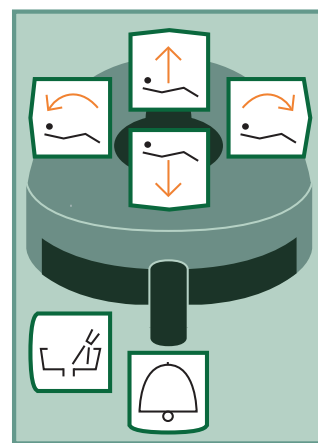

XO Fodkontakt.

-  Position 1
-  Position 2
-  1. aktivering: Skylleposition
2. aktivering: Nulposition
-  Sidste Position
-  Løft stol
-  Sænk stol
-  Løft ryglæn
-  Sænk ryglæn
-  Klinikassistentkald
-  Start / stop fontæneskyl
-  Start / stop vandglasfylder

Mikromotor

Når mikromotoren tages frem, styres den med XO Fodkontakt.

Styr motoren i intervallet 250 – 40.000 o/m med  eller mod uret med .

Sprayforvalg ændres med : vand & luft, kun luft eller ingen spray.

Turbine

Når turbinen tages frem, styres den med XO Fodkontakten.

Turbine startes/standses med  eller .

Sprayforvalg ændres med : vand & luft eller ingen spray.

Ultralydstand- renser

Når tandrenseren tages frem, styres den med XO Fodkontakten.

Start / stop tandrenseren med  eller .

Tilslut / afbryd kølevand .

Vælg mellem 3 kølevands-niveauer:

Forøg niveau med .

Sænk niveau med .

Se aktuel effekt på displayet.






Minimum niveau



Medium niveau



Maximum niveau

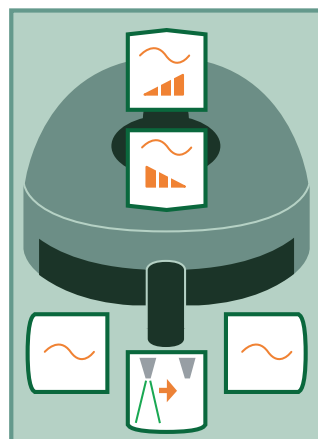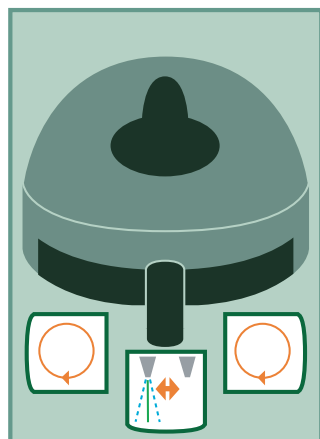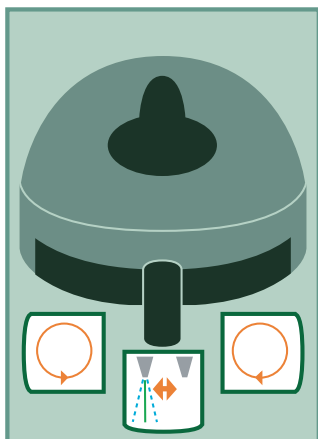

Kompositlampe

Intraoralt videokamera

Når kompositlampen tages frem, styres den med XO Fodkontakten.

Eksponeringstiden er forudindstillet til 20 sekunder.

Start hærtningsproces med  eller .

Et »bip« høres efter hver 10. sek.

Til forskel fra de øvrige unitinstrumenter kan videokameraet benyttes, samtidig med at et andet instrument er aktivt.



Tag kameraet frem og se videobilledet på en skærm.

Videokameraet styres med fodkontakten, når ingen andre instrumenter er valgt.

Skift mellem »still« og »live« mode med .

Note: »Still«-funktionen kræver installation af det fornødne software til en tilsluttet PC.

	Sprayluft & sprayvand
	Sprayvand
	Sprayluft
	Ingen sprayluft & sprayvand

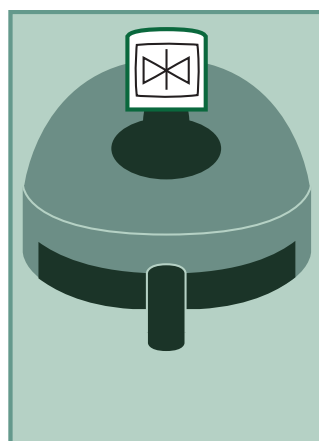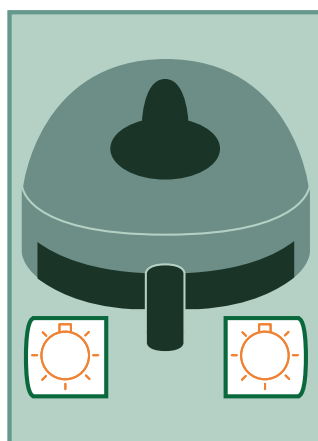

-  Rotation, med uret
-  Rotation, mod uret
-  Sprayforvalg
-  Start / stop tandrenser
-  Tilslut / afbryd kølevand til tandrenser
-  Forøg effektniveau / tandrenser
-  Reducer effektniveau / tandrenser
-  Aktiver kompositlampe
-  Still / Live mode Video Camera

Vedligeholdelse Hygiejne rutiner

Hvis XO Fodkontakten ikke står fast på gulvet, når den er aktiveret:

Rengør gummifødderne under XO Fodkontakten med rensbenzin.

Bemærk:

Efter desinficering af instrument broens overflader, skal væsken fordampe **helt** inden gummi anlæg placeres igen.



Bemærk:

Hvis instrument slanger har været afmonteret, så skal stik og fatning aftørres for evt. vand inden slangen igen monteres i instrument broens fatning.



XO CARE A/S
 Usserød Mølle
 DK 2970 Hørsholm
 Denmark
 +45 70 20 55 11
 info@xo-care.com
 www.xo-care.com

Om morgenen inden første patient

1. Afslut desinfektion af unittens vandsystem:
 - Check at unitinstrumenterne stadig er i instrumentholderen på fontænen
 - Tænd for unitten
 - Unittens vandsystem gennemskyldes automatisk med desinficeringsvæske
 - Se status på display
2. Placer sterile / desinficerede / nye:
 - Instrumentunderlag
 - Unitinstrumenter
 - Vandglas
 - Håndtag på instrumentbro, lampe og skærm
 - Sugefiltre og kapper for sugenipler

Efter hver patient

1. Fjern kontamineret:
 - Unitinstrumenter
 - Instrumentunderlag
 - Vandglas
 - Håndtag på bro, lampe og skærm
2. Rengør og desinficér overflader
3. Placer sterile / desinficerede:
 - Instrumentunderlag
 - Unitinstrumenter
 - Vandglas
 - Håndtag på instrumentbro, lampe og skærm

Om aftenen efter sidste patient

1. Desinficér sugesystemet:
 - Aktivér 
 - Sæt begge sugeslanger på desinficeringsnipler
 - Aktivér 
 - Se status på display
2. Fjern kontamineret:
 - unitinstrumenter
 - Instrumentunderlag
 - Fontæneskål, guldfang og vandglasfylderskål
 - Håndtag på instrumentbro, lampe og skærm
 - Sugefiltre og kapper for sugenipler
3. Rengør og desinficér overflader på unit og stol
4. Placer desinficeret:
 - Fontæneskål, guldfang og vandglasfylderskål (Når fontæneskål er placeret, drejes vandhanen på plads).
5. Start desinfektion af unittens vandsystem:
 - unittens vandsystem:
 - Placer alle instrumenter i instrumentholderen på fontænen
 - Tryk på  for at tømme ekspansionsbeholderen for vand
 - Sluk for unitten med instrumenterne i instrumentholderen på fontænen




Desinficering af vandsystem.



Sugeslanger placeret på desinfektionsnipler.



Fontæneskål tages af.

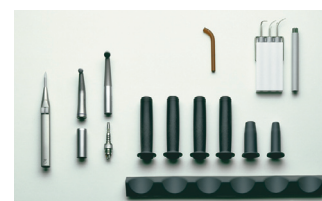

XO 4 dele, som kan autoklaveres (134°C)



Dele, som kan vaskes i en termodesinfektor (90°C).



Rengør jævnligt gummifødderne under XO Fodkontakt med rensbenzin.